



Одноканальні та багатоканальні
дозатори
DISCOVERY Comfort



ОБЛАДНАННЯ ТА РОЗХІДНІ
МАТЕРІАЛИ LIFE SCIENCE



mbalabs.com.ua



HTL LAB SOLUTIONS

DISCOVERY Comfort

Одноканальний дозатор




DISCOVERY Comfort - серія економічних автоматичних піпеток змінного об'єму, що повністю автоклавуються та забезпечують високу точність дозування, відтворюваність результатів та якість. Поєднання елементів «класичної» піпетки європейської якості і сучасного ергономічного дизайну гарантує надійність отримання результатів і комфорт дозування. Зручне колірне маркування у вигляді яскравої широкої смуги на корпусі піпетки дозволяє легко і безпомилково підібрати дозатор необхідного об'єму.

NEW



ЗАМОК
запобігає випадковій зміні об'єму під час роботи

**ПЛАВНЕ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ОБ'ЄМУ**

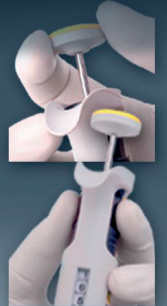

**ЗБІЛЬШЕНИЙ
ДИСПЛЕЙ**

**СИСТЕМА М'ЯКИХ
ПРУЖИН**

зменшує силу натиску



**КОРПУС
АВТОКЛАВУЄТЬСЯ
ПОВНІСТЮ**

**КОЛІРНЕ
МАРКУВАННЯ
ПІПЕТКИ**




ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
корпусу і комплектуючих до хімічно активних речовин і УФ-випромінювання


Дозатор Discovery Comfort задовільняє всі сучасні потреби і забезпечує користувача комфортом під час праці. Створений з міцного та легкого сплаву, не має аналогів серед конкурентів. Завдяки покращеній внутрішній будові, сила натиску зменшилась на 50%, а тактильна заокруглена кнопка робить зручнішим кожен дотик.

МОЖЛИВІСТЬ ЗНЯТТЯ


скидача наконечників і регулювання його довжини

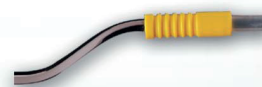

Калібрація

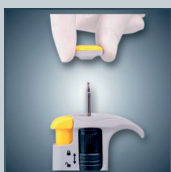

Зніміть кнопку

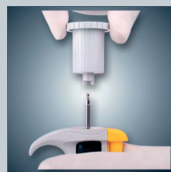

Вставте ключ для калібрації на місце кнопки (ключ постачається в комплекті)



Повертайте ключ для збільшення чи зменшення об'єму



Поставте кнопку на місце. Дозатор відкалібрований

+38(067) 409 45 67 +38(063) 848 44 79 +38(067) 352 90 02

o.kozhevnikova@dna-technology.ua

zakaz@dna-technology.ua

DISCOVERY Comfort

Багатоканальний дозатор



Система підвіски не тільки надійно фіксує наконечники, а також запобігає їх заклинюванню всередині колектора. Заокруглена форма дозволяє легко відпускати наконечники і зменшує зусилля при їх заборі. Для комфортної роботи, колектор може повертатись в різні положення. Беручи до уваги те, що дозатор зручний у використанні та його внутрішні частини виготовлені з міцних та легких матеріалів, він довго та надійно буде використовуватись у Вашій лабораторії.

ІННОВАЦІЙНИЙ БАГАТОКАНАЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

Забір трубками при натисканні на ряд наконечників

Кожна трубка рухається незалежно

Кожен наконечник надійно фіксується

Відсутнє заклинювання

Надійна фіксація при найменшому зусиллі

Наконечники легко від'єднуються



**ГАЧОК
ДЛЯ ПАЛЬЦЯ**
полегшує
захоплення рукою



**ПОВОРОТНИЙ
КОРПУС НА 360°**
робота з дозатором у
будь-якому положенні



**ЗАОКРУГЛЕНИЙ
КОЛЕКТОР**
зменшує зусилля,
необхідні для забору



Контроль якості

Кожен дозатор поставляється разом з унікальним сертифікатом, який засвідчує точність та якість виробу відповідно до стандарту ISO 9001/2000



Всі внутрішні компоненти дозатора Discovery Comfort розроблені за новими стандартами для забезпечення точних результатів Вашої роботи.





DV Сірий тримач

D

Кольоровий тримач


DV8 8 каналів

DV12 12 каналів

Модель	Номер	Колір	Об'єм (мкл)	Похибка точності (%)	Похибка відтворюваності (%)	Підходить до наконечників (мкл)
DV2 D2	4041 4051	Червоний	0,2 1,0 Макс 2,0	$\pm 12,0$ $\pm 2,7$ $\pm 1,5$	$\pm 6,0$ $\pm 1,3$ $\pm 0,7$	10
DV10 D10	4042 4052	Червоний	Мін 0,5 5,0 Макс 10,0	$\pm 4,0$ $\pm 1,0$ $\pm 0,5$	$\pm 2,8$ $\pm 0,6$ $\pm 0,4$	
DV20 D20	4043 4053	Жовтий	Мін 2 10 Макс 20	$\pm 3,0$ $\pm 1,0$ $\pm 0,8$	$\pm 1,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,3$	200
DV50 D50	4047 4057	Жовтий	Мін 5 25 Макс 50	$\pm 2,5$ $\pm 1,0$ $\pm 0,8$	$\pm 2,0$ $\pm 0,6$ $\pm 0,4$	
DV100 D100	4044 4054	Жовтий	Мін 10 50 Макс 100	$\pm 1,6$ $\pm 0,8$ $\pm 0,8$	$\pm 0,80$ $\pm 0,24$ $\pm 0,20$	
DV200 D200	4045 4055	Жовтий	Мін 20 100 Макс 200	$\pm 1,2$ $\pm 0,8$ $\pm 0,6$	$\pm 0,60$ $\pm 0,25$ $\pm 0,20$	300
DV250 D250	4040 4050	Зелений	Мін 50 125 Макс 250	$\pm 1,0$ $\pm 0,8$ $\pm 0,6$	$\pm 0,4$ $\pm 0,3$ $\pm 0,3$	
DV1000 D1000	4046 4056	Синій	Мін 100 500 Макс 1000	$\pm 1,6$ $\pm 0,7$ $\pm 0,6$	$\pm 0,40$ $\pm 0,20$ $\pm 0,15$	1000
DV5000 D5000	4048 4058	Білий	Мін 1000 2500 Макс 5000	$\pm 0,6$ $\pm 0,6$ $\pm 0,5$	$\pm 0,25$ $\pm 0,20$ $\pm 0,15$	5000
DV10000 D10000	4049 4059	Білий	Мін 1000 5000 Макс 10000	$\pm 2,5$ $\pm 0,8$ $\pm 0,5$	$\pm 0,6$ $\pm 0,3$ $\pm 0,2$	10000



Модель	Номер	Колір	Об'єм (мкл)	Похибка точності (%)	Похибка відтворюваності (%)	Підходить до наконечників (мкл)
DV8-10 DV12-10	5121 5125	Червоний	Мін 1 5 Макс 10	$\pm 8,0$ $\pm 4,0$ $\pm 2,0$	$\pm 6,0$ $\pm 2,0$ $\pm 1,2$	10
DV8-50 DV12-50	5122 5126	Жовтий	Мін 5 25 Макс 50	$\pm 4,0$ $\pm 3,0$ $\pm 1,6$	$\pm 2,5$ $\pm 1,2$ $\pm 0,6$	200
DV8-200 DV12-200	5123 5127	Жовтий	Мін 20 100 Макс 200	$\pm 3,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,0$	$\pm 1,5$ $\pm 0,8$ $\pm 0,6$	200
DV8-300 DV12-300	5124 5128	Білий	Мін 50 150 Макс 300	$\pm 1,6$ $\pm 1,2$ $\pm 1,0$	$\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 0,6$	300

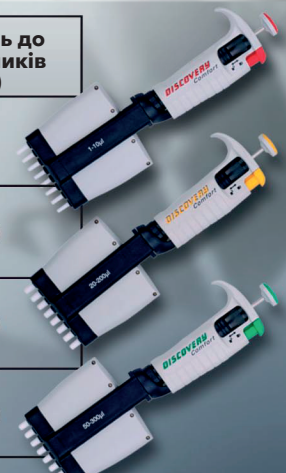

ПІДСТАВКИ:

КАРУСЕЛЬ

ПОВОРОТНА

ЛІНІЙНА

ДЛЯ 8/12-КАНАЛЬНИХ ДОЗАТОРІВ

